



„Unser TOM bietet dem Kunden eine vielfältige Variantengestaltung.
Mit SAVI finden Sie stets die passende Lösung.“

Günter Bußmann
(Geschäftsführer)



Elektrisch
höhenverstellbar

Kopf-/Fußelement
manuell verstellbar
oder optional
elektrisch verstellbar

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und der elektrischen Liegehöhenverstellung bietet das Bett eine sehr gute Therapieunterstützung.

Durch die niedrige Einstiegshöhe von knapp über 30 cm können auch kleinere Kinder eigenständig in das Bett hineinsteigen.



Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:
19.40.01.6175
Pflegehilfsmittel-Nr.:
50.45.01.2175

EN 60601-2-52:2010
DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

T O M



Seitengitterhöhe 113 cm
+ niedriger Einstieg von ca. 20 cm (ohne Rollen)
+ Farbakzent blau-lila



Seitengitterhöhe 135 cm
+ Holzrollen
+ Farbakzent blau-lila



Seitengitterhöhe 72 cm
+ Holzrollen
+ Farbakzent blau-lila

Warum Sie sich für unser **Tom** entscheiden sollten:




Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 71

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!

Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	(19.40.01.6175 50.45.01.2175)	115,5 x 223 cm	155.34.008	
90 x 200 cm	(19.40.01.6175 50.45.01.2175)	105,5 x 223 cm	155.34.008.L	
90 x 170 cm	(19.40.01.6174 50.45.01.2174)	105,5 x 193 cm	155.34.008.M	
65 x 155 cm	(19.40.01.6173 50.45.01.2173)	80,5 x 178 cm	155.34.008.S	
70 x 140 cm	(19.40.01.6173 50.45.01.2173)	85,5 x 163 cm	155.34.008.XS	
Türen				
Vierflügelige Faltschiebetür mit Komfortgriff				•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür		99.750		+
Faltdür in der 270° Version		99.704		+
beidseitig Faltdür in der 270° Version		99.704BEID		+
Verriegelung der Türen				
Kindersicheres Patentschloß				•
Kindersicheres Patentschloß aus Metall		40100003		+
Patentschloß II		99.033		+
Patentschloß III		99.034		+
Patentschloß IV		99.034A		+
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen				
34-104 cm elektrische Höhenverstellung				•
Seitengitterhöhe				
		Gesamthöhe		
72 cm		114 cm		+
113 cm		155 cm		•
135 cm		177 cm		+
Weitere Höhen auf Anfrage				+
Lattenrahmen				
Nicht verstellbar				+
Kopf- / Fußelement manuell verstellbar				•
Kopf- / Fußelement elektrisch verstellbar		99.200		+
Trendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche)		99.211		+
Fahrwerk				
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff				•
4 Buchenholz Designrollen		99.885		o.A.
ohne Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 20 cm		99.883		+
kleine Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 27 cm		99.881		+
Holzart				
Buchenholz				•
Matratzen				
Polyschaum RG 35				•
Federkermmatratze		99.031.2		a.A.
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS		+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI		+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50		+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

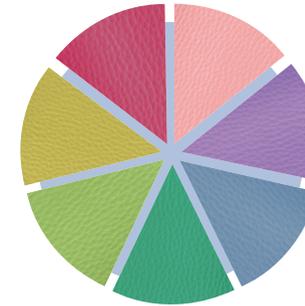

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter: www.savi.de Menüpunkt Abpolsterungen

Technische Daten

Farbakzente		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	o.A.
in Blau-Lila	90.405	•
in Dunkel-Lila	90.406	o.A.
in Blau	90.515	o.A.
in Grün	90.618	o.A.
Ausstattungen		
Kindersicherung auf der Bettseite		o.A.
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		o.A.
Plexiglas im unteren Bereich anstatt Stäbe		•
Stäbe anstatt Plexiglas	99.815	o.A.
Eingriffschutz für die Höhenverstellung	99.900	+
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Netzdach	99.800	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Abpolsterungen		
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung


Vierflügelige Faltschiebetür:

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Die gesamte Seitenfront kann so geöffnet werden. Hier harmonisieren Qualität und Funktion. Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepaßte Zusatztüren. Auch Sonderanfertigungen für Dachschrägen sind kein Problem.




ID: 18965

Verriegelung der Türen:

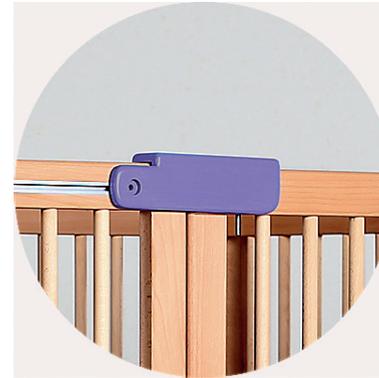

Kindersicheres Patentschloß
(Grundausrüstung)

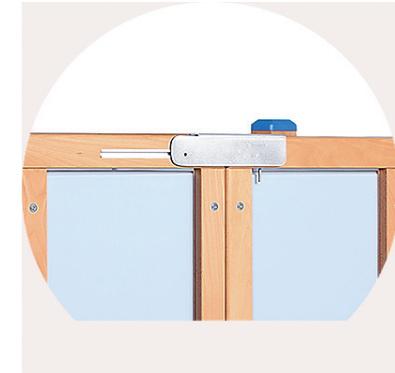

Kindersicheres Patentschloß aus Metall



Patentschloß II



Patentschloß III:
Die Labyrinthführung verhindert ein versehentliches Öffnen durch das Kind. Dieses Patentschloß ist schlüssellos und ohne Magnet. Zudem nachrüstbar.



Patentschloß IV:
Auch hier erfolgt das Öffnen durch eine Labyrinthführung. Jedoch erfolgt dieses zusätzlich noch gegen einen Widerstand. Dieses Patentschloß ist schlüssellos, ohne Magnet und nachrüstbar.



externe Türsicherung
an der Bettseite
(erhöht die Stabilität und bietet
noch mehr Sicherheit)

Vorzüge der 270° Tür:

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fester Skai-Polsterung möglich



ID: 20109



ID: 20009



ID: 15938

Das zeichnet **Tom** aus:

- Seitengitterhöhe 72 cm,
Seitengitterhöhe 113 cm,
Seitengitterhöhe 135 cm /
andere Höhen auf Anfrage
- Liegehöhe 34 cm bis 104 cm oder
Liegehöhe 20 cm bis 90 cm (ohne Rollen)
- Trendelenburg/
Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Plexiglasverkleidung
im unteren Bereich und
Stäbe im oberen Bereich /
andere Varianten auf Anfrage



ID: 18463

T O M

Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



ID: 18677



ID: 20048



ID: 13876



ID: 18574



ID: 18471

Integrierte Vinylfenster:

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Zudem ist das Rein- und Raussehen möglich, welches die Kontrollmöglichkeit und das Wohlbefinden des Kindes steigert.



ID: 18866



ID: 20018



ID: 20723



ID: 20324



ID: 14364
weiß lackiert



ID: 13175
mit niedrigem Einstieg
(ohne Rollen)



ID: 20011
bunte Stäbe



ID: 18429
Anpassung an eine Dachschräge



ID: 17767
komplett Stäbe



ID: 14849
Eingriffschutz
für die Höhenverstellung



ID: 16472
Kindername
auf der Bettseite



ID: 14280
Seitengitterhöhe 72 cm

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:
Befestigung mit selbstklebenden Flausch an den Seitenholmen.



2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.



3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/Abpoterungen

Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



7. Stab- und Rahmenpolsterung

Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

ZUBEHÖR

Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt

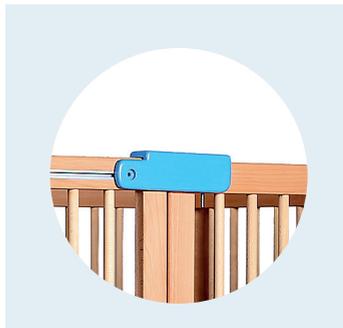


Patentschloß

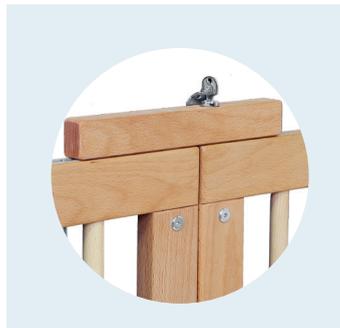


Patentschloß II

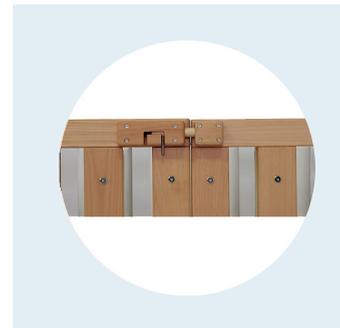


Patentschloß III

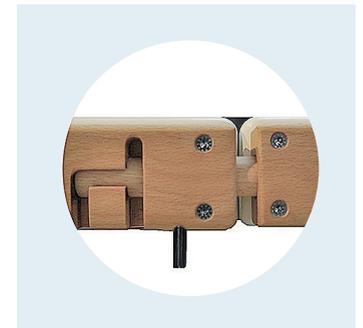

Patentschloß IV

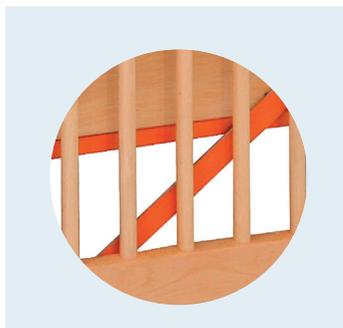

absenkbares Seitengitter

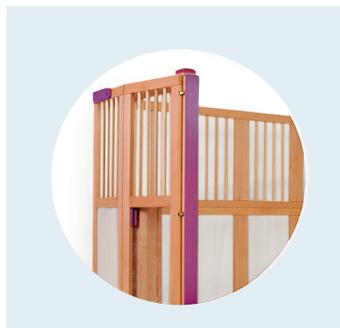

270° Tür



Eckpfosten




Trittschutz



Kindergartenname auf der Bettseite




bunte Stäbe

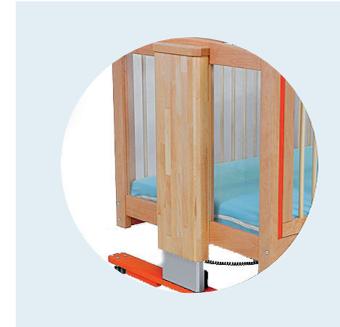


Motorabdeckung




Schubkästen

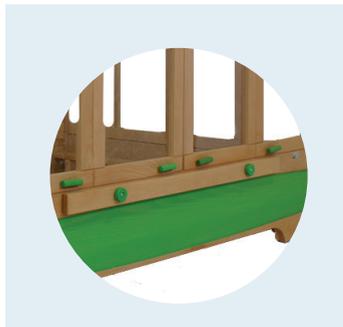


externe Türsicherung an der Bettseite

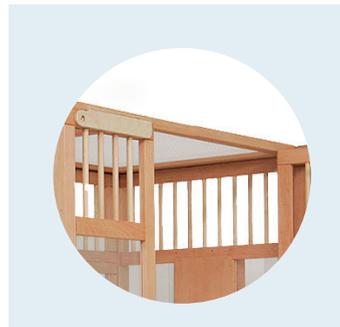


Netzdach

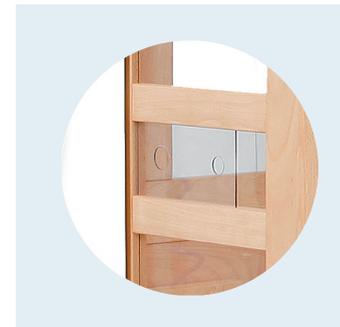


Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus

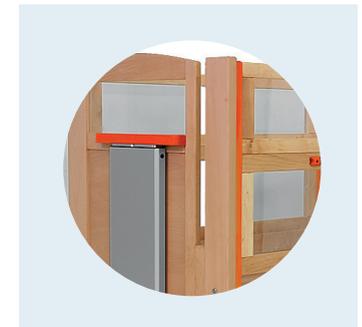


Schlauchdurchführung

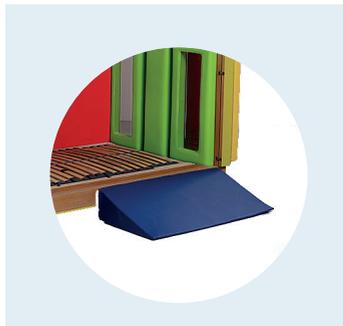


Einstieghilfe aus Kunstleder

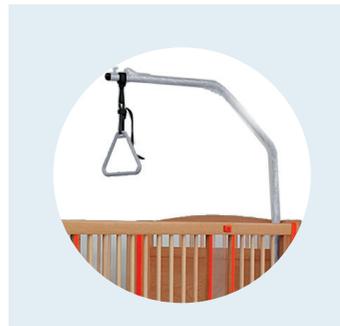

Bettgalgen

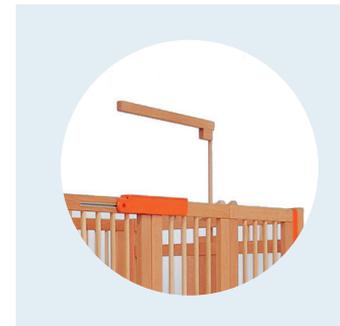

Spielbogen Holz

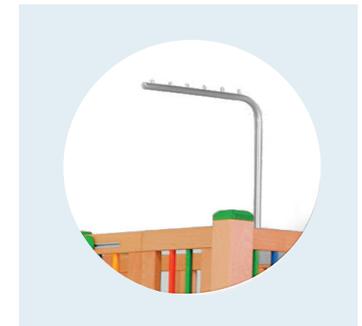

Spielbogen Metall



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür 4-flügelige Tür 270° Tür Falttür
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I Patentschloß II Patentschloß III Patentschloß IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

Ja In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche Kiefer

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur gelb orange blau-lila dunkel-lila
 blau grün weiß gebeizt weiß lackiert andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung feste Skai-Polsterung Kantenpolsterung

Motivpolsterung: Paula Paul Greta

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja Wenn ja, in welchem Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffsschutz Netzdach Infusionshalter Motorenabdeckung (Knut)
 Matratzenhalter Aufrichter Schlauchdurchführung abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum _____ Firmenstempel _____

So geht's ganz schnell:
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung
 unter:

025 64 - 93 09-60

SAVI GmbH
 Reha Solutions
 Lise-Meitner-Str. 10
 D-48691 Vreden

Postfach 1123
 D-48684 Vreden
 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
 Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

www.savi.de



www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden

Fon: +49(0)2564-9309-70
Fax: +49(0)2564-9309-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen